

# Wortie®

## Advanced

### Advanced Wratte­verwijderaar

- Inhoud**
- A. Indications
  - B. Inhoud van Wortie® Advanced wratten­verwijderaar
  - C. Achtergrondinformatie over wratten
  - D. Waarschuwingen
  - E. Voorzorgsmaatregelen
  - F. Wat te doen als u niet zeker weet of het een wrat is?
  - G. Hoe werkt Wortie® Advanced wratten­verwijderaar?
  - H. Neven­werkingen
  - I. Instructies voor gebruik
  - J. Opvolging behandeling

#### A. Indications

Wortie® Advanced wratten­verwijderaar is aangegeven voor de behandeling van hardnekkige, volgroei­de, vereelt­te hand- en voet­wratte­n. Wortie® Advanced wratten­verwijderaar is vrij verkrijgbaar (zonder voorschrift).

#### B. Inhoud van Wortie® Advanced wratten­verwijderaar

Een houder onder druk gevuld met 50 ml gecompri­mdeer vloeibaar gas (dimethyl ether), met een platte metalen punt die wordt gebruikt om de koude over te brengen op de wrat.

Een tube met geleidende gel en een set beschermende schuim­pleisters.

In deze bijsluiter kunt u informatie lezen over het product, hoe het werkt en hoe u het moet gebruiken om wratten te behandelen. De bijsluiter bevat ook waarschuwingen en beperkingen.

#### C. Achtergrondinformatie over wratten

Wratte­n ontwikkelen zich vaak op de vingers, op de rug van de handen of op knieën en ellebogen. U kunt een gewone wrat herkennen aan het ruwe „bloemkoolachtige“ oppervlak. Het wratten­virus, dat zeer besmettelijk is, kan worden overgedragen van persoon op persoon of van één plaats op het lichaam naar een andere door direct contact met een besmette zone.

Voet­wratte­n lijken op gewone wratten maar komen alleen voor op de voet­zolen of onder de tenen. Ze zijn meestal pijnlijk en zien er vaak uit als een kleine witte ring van huid met zwarte stipjes in het midden. Ook voet­wratte­n zijn besmettelijk en kunnen worden overgedragen op een andere persoon door contact met een nat oppervlak zoals een vloer.

#### D. Waarschuwingen

- Uitsluitend gebruiken zoals voorgeschreven.
- Vanwege de besmettelijkheid van het virus dient de geleidende gel uitsluitend aangebracht te worden op wratten en/of voet­wratte­n.
- Gebruik dit product niet als u de wrat die u wilt behandelen niet duidelijk kunt zien. Als u Wortie® Advanced wratten­verwijderaar aanbrengt op aandoeningen die geen wratten zijn, kan het ernstige brandwonden en blijvende littekens op de huid veroorzaken.
- Gebruik de geleidende gel niet als u gevoelig bent voor één of meerdere van de bestanddelen.
- Oefen niet te veel druk uit wanneer u de applicator op de wrat drukt.
- Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 jaar. Het is niet zeker wat het effect is van Wortie® Advanced wratten­verwijderaar op de huid van het kind.
- Niet gebruiken als u diabetes of een slechte bloedsomloop hebt. Wortie® Advanced wratten­verwijderaar werkt door de wrat te bevriezen. De bevoren zone bij diabetespatiënten en mensen met een slechte bloedsomloop kan mogelijk niet zo snel of onvolledig genezen worden.
- Niet gebruiken als u zwaar bent of borstvoeding geeft. Het is niet bekend wat het effect is van Wortie® Advanced wratten­verwijderaar bij patiënten in deze omstandigheden.
- Niet gebruiken op zones met een dunne huid, zoals het gezicht, de oksels, de borsten, de billen of de geslachtsorganen. Het gebruik van Wortie® Advanced wratten­verwijderaar op deze zones kan brandwonden en blijvende littekens veroorzaken.
- Niet gebruiken op getreunde huid of op zones die geïnfecteerd of rood zijn, of die tekenen van ontstek­ing vertonen, zoals jeuk of zwelling. Deze zones behandelen met Wortie® Advanced wratten­verwijderaar zal de aandoening nog verergeren en mogelijk verder infecteren. Deze aandoeningen zijn mogelijk geen wratten en moeten worden onderzocht door een arts.
- Niet gebruiken op moedervlekken, wratten waar haar op groeit, genitale wratten (op de penis of de vaginale zone), of wratten op het gezicht of de slijmvliezen (zoals in de mond, neus, anus, geslachtsorganen, lippen, oren of rond de ogen). Het gebruik op deze zones kan brandwonden en blijvende littekens op de huid veroorzaken, of leiden tot blindheid.

- De schuim­pleister en/of gel niet aanbrengen op open, geïnfecteerde of niet­gereinigde wonden.
- Niet langer aanbrengen dan de aangegeven applicatietijd: 20 seconden voor gewone wratten of 40 seconden voor voet­wratte­n. Niet te veel druk uitoefenen wanneer u de applicator op de wrat drukt.
- Niet gebruiken als u de informatie op de verpakking of in deze bijsluiter niet goed kunt lezen.

**Gebruik Wortie® Advanced wratten­verwijderaar uitsluitend als u zeker bent dat de huidaandoening een wrat is (een gewone wrat of zekert wrat).**

**Raadpleeg uw arts als u niet zeker bent.** Als u een huidaandoening behandelt als een wrat met Wortie® Advanced wratten­verwijderaar en het is geen wrat, vertraagt u een adequate behandeling. Deze vertraging kan aanleiding geven tot een ernstigere huidaandoening of ziekte.

**Vermijd contact met de ogen.** Contact met de ogen kan blindheid veroorzaken. Wrijf niet in uw ogen/raak uw ogen niet aan met uw handen als u er Wortie® Advanced wratten­verwijderaar op aangebracht hebt. Als het product in de ogen terecht­komt, spoelen met water gedurende 15 minuten en onmiddellijk een arts raadplegen.

**Niet inslikken.** De inhoud is giftig en kan ernstige inwendige schade toebrengen. Als u het product hebt ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of neem contact op met het Antifocentrum.

**Uitsluitend voor uitwendig gebruik.** Als Wortie® Advanced wratten­verwijderaar niet precies zoals voorgeschreven gebruikt wordt, of als u het per ongeluk rechtstreeks op de huid aanbrengt of gebruikt op aandoeningen die geen wratten zijn, kan het ernstige brandwonden en blijvende littekens op de huid veroorzaken.

**Buiten het bereik van kinderen houden.** Kinderen kunnen de instructies over hoe u dit product gebruikt verkeerd begrijpen. De inhoud is giftig als hij wordt ingeslikt, ingesliemd, op andere lichaamsdelen dan wratten wordt gespoten of wordt blootgesteld aan hitte.

#### E. Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik Wortie® Advanced wratten­verwijderaar niet als:
  - de activeringsknop klemt zich in stand '1' na activering, en/of,
  - de uwer 'sissend' geluid hoort tijdens de activering (loslaten van de 'overshoot'), en/of,
  - het 'sissende' geluid aanhoudt na activering, en/of,
  - de punt niet koud wordt na activering- op de metalen punt moet een 'ijsjaagje' zichtbaar worden.

*Als aan één of meer van de hierboven vermelde voorwaarden niet voldaan is, werkt het systeem mogelijk niet goed. Een slecht werkend product kan letsel­veroorzaken of aanleiding geven tot een ontoereikende/onvolledige behandeling.*

- De metalen punt is bekleed met nikkel, dat een allergische reactie kan veroorzaken.
- De geleidende gel mag alleen worden gebruikt voor de behandeling van hardnekkige, volgroei­de wratten. Raadpleeg uw huisarts als u niet zeker bent over de toestand van de ongewenste wrat.
- Als de applicator wordt gebruikt door meer dan één persoon en/of na elke applicatie, de applicator reinigen met alcohol op een doekje.
- Laat de metalen punt op kamertemperatuur komen na elke applicatie voordat u de wratten­verwijderaar opnieuw activeert voor gebruik op andere wratten.
- Als er meer dan één wrat op een vinger of teen aanwezig is, telkens slechts één wrat behandelen. Meer dan één wrat bevriezen op een kleine huidzone kan aanleiding geven tot een langer genezingsproces of een slechte genezing van de huidzone. Behandel elke resterende wrat afzonderlijk en laat een periode van twee weken tussen de behandelingen.
- In de meeste gevallen is voor elke wrat slechts één behandeling nodig. Behandel elke wrat niet meer dan twee keer met Wortie® Advanced wratten­verwijderaar. Raadpleeg uw huisarts als twee behandelingen geen verbetering hebben gebracht.
- Gebruik Wortie® Advanced wratten­verwijderaar niet samen met een andere methode om wratten te verwijderen; het is namelijk niet bekend wat het effect is van de combinatie op uw huid. Gebruik in combinatie met andere producten kan ernstige brandwonden en blijvende littekens op de huid veroorzaken.
- De pijn/het prikken­de gevoel na behandeling van gewone wratten zou een paar uur na de applicatie moeten verdwijnen. Voor voet­wratte­n kan de pijn/het prikken­de gevoel 24 uur aanhouden. Als het ongemak, de pijn/het prikken­de gevoel langer aanhoudt - 24 uur voor gewone en voet­wratte­n - raadpleeg dan uw huisarts. Dit kan betekenen dat de huidzone te diep bevroren is. In dit geval kan medische verzorging noodzakelijk zijn.

- De damp/spray niet inademen. Uitsluitend gebruiken in goed verluchte ruimtes. De damp/spray inademen, kan giftig zijn.
- Was uw handen (met uitzondering van de behandelde zone) onmiddellijk na gebruik. De behandelde zone onmiddellijk wassen, kan onaangenaam zijn omdat u nog wat last kunt hebben van pijn/een prikken­de gevoel. De behandelde zone kan worden gewassen als de pijn/het prikken­de gevoel verdwenen is.
- De meegeleverde beschermende schuim­pleisters zijn uitsluitend voor eenmalig gebruik. Gooi ze na gebruik weg en gebruik ze niet opnieuw.

Uiterst ontvlambaar. Houder onder druk. De houder niet doorprikken of verbranden, zelfs niet na gebruik. Uit de buurt houden van hitte/vonken/open vuur/hete oppervlakken - Niet roken. Niet op een open vuur of andere onsteking­sbron spuiten. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Het product beschermen tegen zonlicht en bewaren op een droge en koele plaats. De houder doorboren of blootstellen aan hitte kan de houder doen ontploffen en ernstige letsel­veroorzaken.

#### F. Wat te doen als u niet zeker weet of het een wrat is?

Gebruik Wortie® Advanced wratten­verwijderaar uitsluitend als u zeker bent dat de huidaandoening een wrat is. Raadpleeg uw arts als u niet zeker bent. Als u een huidaandoening behandelt als een wrat met Wortie® Advanced wratten­verwijderaar en het is geen wrat, vertraagt u een adequate behandeling. Deze vertraging kan aanleiding geven tot een ernstigere huidaandoening of ziekte. Lees aandachtig 'Waarschuwingen' en 'Voorzorgsmaatregelen'.

#### G. Hoe werkt Wortie® Advanced wratten­verwijderaar?

- Wortie® Advanced wratten­verwijderaar bevriest de ongewenste wrat of voet­wrat. De geleidende gel optimaliseert het bevroeringsproces door de koude naar de applicat­iezone te leiden en op die manier de huid te bevochtigen met het oog op een uiterst doeltreffende bevroering. Wanneer de koude applicatorpunt op de wrat gedrukt (aangebracht) wordt, begint het bevroeringsproces binnen enkele seconden en zal de huid wit worden. Als gevolg van het bevroeringsproces zal lichte pijn, jeuk en/of een prikken­de gevoel optreden. Zodra de applicator verwijderd is, zal de huid terug­kleur krijgen en zullen de pijn, jeuk en/of het prikken­de gevoel snel afnemen en binnen een paar uur verdwijnen.
- Als de zone terug op temperatuur is en de huid haar kleur terugkrijgt, kan de bevoren zone rood worden. Als gevolg van de bevroering kan zich na enkele dagen in sommige gevallen een blaar vormen (soms gevuld met bloed) onder de wrat. Deze blaar is niet altijd zichtbaar.
- De bevoren huid met de behandelde wrat zal na ongeveer 10-14 dagen afvallen. Ondertussen zal zich onder de blaar nieuw huid gevormd hebben.

#### H. Neven­werkingen

- Volg nauwgezet de aangegeven applicatietijd (20 seconden voor gewone wratten / 40 seconden voor voet­wratte­n) om lokale weefschade te vermijden.
- Na de behandeling kan de kleur van de huid veranderen, gaande van wit tot rood. Onder de wrat kan zich een blaar vormen en normaal zult u (maximaal) gedurende enkele uren last hebben van pijn/een prikken­de gevoel. Als de pijn of het prikken­de gevoel aanhoudt tot de volgende dag (24 uur), of als zich een ander probleem voordoet (zoals bevroering van de huid over een zone groter dan de wrat of gevoelloosheid), neem dan contact op met uw arts. Het is normaal dat de behandelde zone enkele dagen gevoelig is.
- Als de wrat of voet­wrat afgevallen is, kan depigmentatie (kleuverloosheid) of een klein litteken verschijnen.
- In het midden van de wrat kunnen na enkele dagen zwarte stipjes verschijnen.
- Het gebruik van cryotherapie om wratten te bevriezen, kan aanleiding geven tot lichte brandwonden als gevolg van de lage vriestemperatuur. Als u last hebt van meer ongemak dan verwacht, raadpleeg dan uw arts.

#### I. Instructies voor gebruik (gewone wratten)



#### Gewone wratten

Breng een druppel van de geleidende gel precies op de wrat aan, zonder te hard in de gel tube te knijpen.

1. Verwijder de dop en zet de houder recht op een tafel of een vlakke ondergrond. Hou de houder vast bij de ring.
2. **Houd het product verticaal (niet kantelen):** houd de 'ring' stevig vast tussen uw duim en wijsvinger, draai de activeringsknop linksom met uw andere hand en duw de activeringsknop naar beneden

- gedurende drie seconden zonder de metalen punt aan te raken. U zult het activeringsgel (geel) horen.
- 3. Controleer of de activeringsknop automatisch terug naar nul draait om het systeem te vergelijken voordat u het product aanbrengt. Wacht 2 seconden; de metalen punt bevriest.
- 4. Breng de bevoren metalen punt nauwkeurig aan op de wrat (hand), gedurende 20 seconden.

#### Voet­wratte­n

- Breng een druppel van de geleidende gel precies op de voet­wrat aan, zonder te hard in de gel tube te knijpen.
- 1. Verwijder de dop en zet de houder recht op een tafel of een vlakke ondergrond. Hou de houder vast bij de ring.
- 2. **Houd het product verticaal (niet kantelen):** houd de 'ring' stevig vast tussen uw duim en wijsvinger, draai de activeringsknop linksom met uw andere hand en duw de activeringsknop naar beneden gedurende drie seconden zonder de metalen punt aan te raken. U zult het activeringsgel (geel) horen.
- 3. Controleer of de activeringsknop automatisch terug naar nul draait om het systeem te vergelijken voordat u het product aanbrengt. Wacht 2 seconden; de metalen punt bevriest.
- 4. Breng de bevoren metalen punt nauwkeurig aan op de voet­wrat, gedurende 40 seconden.

Als u een bijzonder gevoelige huid hebt (d.w.z. als lopen moeilijk is na de behandeling), kunt u een schuim­pleister gebruiken om de gevoelige zone van de voet­wrat te beschermen na de behandeling. Haal de schuim­pleister voorzichtig van de nagel­berg. Breng de kleefzide van de schuim­pleister aan op de huid met de opening direct over de kleine, pijnlijke plek.

**Het is belangrijk dat u de instructies in de bijsluiter nauwgezet opvolgt. Onzorgvuldig toeberegen kan leiden tot een diepe bevroering en blijvende schade toebrengen aan de bovenste huidlaag van de vingers en de tenen. Dit kan blijvende littekens of zenuwbeschadiging veroorzaken.**

#### J. Opvolging behandeling

- Houd de behandelde zone schoon.
- U mag wassen en douchen.
- U mag krabben of pulken aan de behandelde zone; dit kan infecties veroorzaken.
- Bescherm blaren indien nodig met een gaasverband of een steriel kleefverband.
- Blaren niet openprikken. Blaren openprikken, is pijnlijk en kan infecties veroorzaken.
- Vermijd blootstelling aan de zon of gebruik een zonnecrème (SPF 30 of hoger) en beperk trauma's op behandelde zones totdat de huid volledig genezen is (d.w.z. de wrat is afgevallen en de huid haar normale kleur heeft).

#### Wortie® Advanced wratten­verwijderaar bevat:

- Houder (50 ml)
- Bestanddelen: Dimethyl ether
- Tube met geleidende gel (3 ml)
- Bestanddelen: Aqua, Propylene Glycol, Phenoxethanol, Carbomer, Triethanolamine, Caprylylhydroxamic Acid, Methylpropanediol
- Zes beschermende schuim­pleisters

CE 0481

Laatste herziening: januari 2015

Het product kan gebruikt worden tot de uiterste houdbaarheids­datum, die op de verpakking vermeld wordt.

Voor meer informatie en een instructiefilm­pje, surf naar

[www.wortie.be](http://www.wortie.be)

## Produit anti-­verrues (vulgaires et plantaires) Wortie Advanced

#### Sommaire

- A. Indications
- B. Contenu du produit anti-­verrues (vulgaires et plantaires) Wortie® Advanced
- C. Informations sur les verrues
- D. Mises en garde
- E. Précautions d'emploi
- F. Que faire si vous n'êtes pas sûr(e) qu'il s'agit bien d'une verrue ?
- G. Comment le produit anti-­verrues (vulgaires et plantaires) Wortie® Advanced agit-il ?
- H. Effets secondaires
- I. Instructions d'emploi
- J. Suivi du traitement

#### A. Indications d'emploi

Le produit anti-­verrues (vulgaires et plantaires) Wortie® Advanced est indiqué pour le traitement général des verrues tenaces et calleuses à maturité.

#### B. Contenu du produit anti-­verrues (vulgaires et plantaires) Wortie® Advanced

Une bombe sous pression contenant 50ml de diméthyléther liquéfié comprimé, à embout métallique plat pour l'application du froid sur la verrue (vulgaire ou plantaire).

Un tube de gel conducteur et une série de pansements protecteurs en mousse.

Cette notice vous informe sur l'action, l'utilisation et les limites du produit et vous transmet quelques mises en garde.

#### C. Informations sur les verrues

Les verrues (dites vulgaires) se développent généralement sur les doigts ou sur la dos des mains, les genoux et les coudes. Les verrues, dites vulgaires sont reconnaissables à leur surface rugueuse en « chou-fleur ». Le virus responsable de l'apparition des verrues vulgaires, qui est très contagieux, se transmet d'une personne à l'autre ou d'une partie du corps à une autre par contact direct avec une zone infectée.

Les verrues plantaires ressemblent aux verrues vulgaires, mais elles apparaissent uniquement sur la plante des pieds ou sous les orteils. Habituellement douloureuses, elles se présentent souvent sous forme de points noirs entourés d'un petit anneau de peau blanche. Les verrues plantaires sont également contagieuses. Elles peuvent se transmettre par contact avec une surface humide, telle que le sol.

#### D. Mises en garde

- Respectez rigoureusement les instructions d'emploi.

- Puisque le virus est contagieux, utiliser le gel conducteur seulement sur une verrue à traiter.
- N'utilisez pas ce produit si vous ne pouvez pas voir clairement la verrue à traiter. L'application du produit anti-­verrues (vulgaires et plantaires) Wortie® Advanced sur d'autres affections cutanées que des verrues peut entraîner de graves brûlures et une cicatrice permanente.
- N'utilisez pas le gel conducteur si vous êtes sensible à un ou plusieurs des composants.
- N'exercez pas une pression excessive, lorsque vous appuyez l'applicateur sur la verrue vulgaire ou plantaire.
- N'utilisez pas ce produit chez des enfants de moins de 12 ans. L'effet du produit anti-­verrues (vulgaires et plantaires) Wortie® Advanced sur la peau des enfants n'est pas établi avec certitude.
- Ne pas utiliser ce produit si vous souffrez de diabète ou en cas de mauvaise circulation sanguine. Le produit anti-­verrues (vulgaires et plantaires) Wortie® Advanced agit en congelant la verrue. Chez les diabétiques et les personnes souffrant d'une mauvaise circulation sanguine, la zone traitée par réfrigération pourrait ne pas guérir aussi rapidement et totalement.
- N'utilisez pas ce produit si vous êtes enceinte ou allaitée. L'effet du produit anti-­verrues (vulgaires et plantaires) Wortie® Advanced n'est pas établi avec certitude chez de tels patients.
- N'utilisez pas ce produit anti-­verrues (vulgaires et plantaires) sur des zones où la peau est fine, telles que le visage, les aisselles, la poitrine, les fesses ou les organes génitaux. Un usage sur ces zones pourrait causer des brûlures et une cicatrice permanente.
- Ne pas appliquer sur une peau irritée ou toute zone infectée, présentant des rougeurs ou des signes d'inflammation quelconques tels que des démangeaisons ou des gonflements. Traiter ces zones avec le produit anti-­verrues (vulgaires et plantaires) Wortie® Advanced ne ferait qu'aggraver la situation et éventuellement l'infection. Il peut s'agir d'autre chose qu'une verrue, à faire examiner par un médecin traitant.
- N'appliquez pas le produit sur des grains de beauté, des taches de naissance, des verrues sur lesquelles apparaissent des poils, des verrues génitales (sur le pénis ou la zone vaginale) ou des verrues sur le visage ou les muqueuses (comme à l'intérieur de la bouche, du nez, de l'anus, des organes génitaux, des lèvres, des oreilles ou à proximité des yeux). Un usage du produit sur ces zones pourrait provoquer des brûlures et une cicatrice permanente voire une cécité.
- N'appliquez pas le pansement en mousse et/ou le gel sur des lésions ouvertes, infectées ou sales.
- Ne dépassez pas la durée indiquée d'application du produit : 20 secondes pour les verrues vulgaires et 40 secondes pour les verrues plantaires. N'exercez pas une pression excessive lorsque vous appuyez l'applicateur sur la verrue vulgaire ou plantaire.
- N'utilisez pas ce produit si vous ne savez pas lire clairement les informations sur le récipient ou cette notice explicative.

#### N'utilisez le produit anti-­verrues (vulgaires et plantaires) Wortie®

**Advanced que si vous êtes absolument sûr(e) que l'affection cutanée est une verrue (vulgaire ou plantaire).**

**En cas de doute, consultez votre médecin traitant.** Si vous traitez une affection cutanée avec le produit anti-­verrues (vulgaires et plantaires) Wortie® Advanced, comme s'il s'agissait d'une verrue et qu'il n'en est rien, vous retarderez la mise en place d'un traitement approprié. Ce retard peut donner lieu à une affection cutanée ou une maladie bien plus grave.

**Évitez tout contact avec les yeux.** Un contact avec les yeux peut provoquer une cécité. Ne vous frottez et ne vous touchez pas les yeux avec les mains, lorsque vous avez appliqué le produit anti-­verrues (vulgaires et plantaires) Wortie® Advanced sur celles-ci. En cas de contact du produit avec les yeux, rincez abondamment à l'eau pendant 15 minutes et faites immédiatement appel à des secours médicaux.

**Ne pas avaler le produit.** Le contenu de ce produit est toxique. Il peut occasionner de graves lésions internes. Si vous en avez avalé, faites immédiatement appel à des secours médicaux ou contactez un centre antipoison.

**Réservé à un usage externe.** De graves brûlures et une cicatrice permanente sont possibles en cas d'usage du produit anti-­verrues (vulgaires et plantaires) Wortie® Advanced non-conforme aux instructions ou d'application directe sur la peau ou sur des affections cutanées autres que des verrues.

**Tenez le produit hors de portée des enfants.** Les enfants ne sont pas en mesure de comprendre les instructions relatives à l'usage adéquat de ce produit. Son contenu présente des risques, s'il est avalé, inhalé, vaporisé sur des parties du corps autres que des verrues ou en cas d'exposition à la chaleur.

#### N. Précautions d'emploi

- N'utilisez pas le produit anti-­verrues (vulgaires et plantaires) Wortie® Advanced
  - si la molette est bloquée en position « 1 » après son activation et/ou en l'absence de « sifflement » au cours de l'activation (libération de l'aérosol) et/ou
  - en cas de « sifflement » continu après l'activation et/ou
  - d'embout qui ne se refroidit pas après l'activation (une « surface réfrigérée » doit être visible sur l'embout métallique).
- En l'absence d'une ou de plusieurs des situations susmentionnées, le dispositif pourrait ne pas fonctionner dûment. Une défaillance du dispositif médical peut entraîner des blessures ou un traitement insuffisant/incomplet.
  - L'embout métallique est revêtu d'une couche de nickel susceptible d'occasionner une réaction allergique.
  - L'usage du gel conducteur est réservé au traitement des verrues vulgaires et plantaires tenaces et arrivées à maturité. En cas d'incertitude sur l'état de la verrue vulgaire ou plantaire indésirable, consultez votre médecin traitant.

- Si le produit est utilisé par plusieurs personnes et/ou après chaque application, il y a lieu de nettoyer l'applicateur avec un chiffon imbibé d'alcool.
- Attendez que l'embout métallique atteigne une température ambiante après chaque application, avant toute réactivation du dispositif pour le traitement d'autres verrues.
- Traitez une seule verrue à la fois, si un doigt ou un orteil présente plusieurs verrues. Réfrigérer plus d'une verrue sur une même zone spécifique peut allonger le processus de guérison ou empêcher la guérison correcte de la zone. Traitez toute autre verrue séparément, en espacant les traitements de deux semaines.
- Un seul traitement est généralement nécessaire pour venir à bout de chaque verrue. Il ne faut jamais traiter une même verrue avec le produit anti-­verrues (vulgaires et plantaires) Wortie® Advanced plus de deux fois. Si vous n'observez aucune amélioration après deux traitements, consultez votre médecin traitant.
- N'appliquez jamais le produit anti-­verrues (vulgaires et plantaires) Wortie® Advanced conjointement avec toute autre méthode anti-­verrues, car vous ne connaissez pas l'effet que cette combinaison de produits pourrait avoir sur votre peau. Un usage combiné peut entraîner de graves brûlures et une cicatrice permanente.
- La sensation de douleur/picotement suite au traitement des verrues vulgaires devrait disparaître dans les quelques heures suivant l'application. En ce qui concerne les verrues plantaires, la sensation de douleur/picotement peut durer 24 heures. Si la sensation d'inconfort ou de douleur/picotement se prolonge au-delà de ce délai, soit 24 heures pour les verrues vulgaires et plantaires, parlez-en à votre médecin traitant. Cela peut indiquer une congélation trop profonde de la zone et la nécessité d'une attention médicale.
- N'inhaliez pas les vapeurs/vaporisations. N'utilisez le produit que dans des pièces bien aérées. Respirer les vapeurs/vaporisations peut présenter un risque de toxicité.
- Lavez-vous les mains (à l'exception de la zone traitée) immédiatement après usage. Laver la zone traitée immédiatement après le traitement pourrait présenter un certain inconfort, car vous pourriez encore ressentir un(e) léger douleur/léger picotement. Vous pouvez laver la zone traitée dès que la sensation de douleur/picotement s'atténue.
- Les pansements de protection en mousse fournis sont à usage unique. Léses-les après usage et ne les réutilisez pas.
- Extrêmement inflammable. Récipient sous pression : risque d'explosion en cas d'échauffement. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 F. Protégez tous les dispositifs médicaux du rayonnement solaire et conservez-les dans un lieu sec et frais. Le percage du récipient ou son exposition à la chaleur peut entraîner son explosion et dès lors de graves blessures.

## F. Que faire si vous n'êtes pas sûr(e) qu'il s'agit bien d'une verrue

N'utilisez le produit anti-verrues (vulgaires et plantaires) Wortie® Advanced que si vous êtes absolument sûr(e) que l'affection cutanée est une verrue. En cas de doute, consultez votre médecin traitant. Si vous traitez une affection cutanée avec le produit anti-verrues (vulgaires et plantaires) Wortie® Advanced comme s'il s'agissait d'une verrue et qu'il n'en est rien, vous retarderez la mise en place d'un traitement approprié. Ce retard peut entraîner une affection cutanée ou une maladie bien plus grave. Lisez attentivement les « Mises en garde » et les « Précautions d'emploi ».

## G. Comment le produit anti-verrues (vulgaires et plantaires) Wortie® Advanced agit-il ?

- Le produit anti-verrues (vulgaires et plantaires) Wortie® Advanced agit en congelant la verrue vulgaire ou plantaire indésirable. Le gel conducteur maximise le potentiel de réfrigération en dirigeant le froid sur la zone d'application et ce faisant en humidifiant la peau pour garantir une efficacité extrême. Lorsque vous appuyez (appliquez) l'embout froid de l'applicateur sur la verrue, la réfrigération commence après quelques secondes et la peau blanchit. Une légère sensation de douleur, démangeaison et/ou picotement apparaîtra suite à la réfrigération. Après le retrait de l'applicateur, la peau retrouve sa coloration et la sensation de douleur, démangeaison et picotement diminue rapidement et disparaît au bout de quelques heures.
- Après le retour de la zone traitée à la température de la peau et après la recoloration, une rougeur de la même taille que la région réfrigérée peut faire son apparition. Dans certains cas, une ampoule (parfois remplie de sang) peut se former sous la verrue dans les quelques jours qui suivent le traitement par le froid. Celle-ci n'est pas toujours visible.
- La peau réfrigérée au niveau de la verrue traitée tombera au bout de 10 à 14 jours. Une nouvelle peau se formera entre-temps sous l'ampoule.


## H. Effets secondaires

- Respectez soigneusement la durée d'application indiquée (20 secondes pour les verrues vulgaires / 40 secondes pour les verrues plantaires), afin d'éviter toute lésion tissulaire locale.
- Après l'application, la coloration de la peau peut varier du blanc au rouge. Une ampoule peut se former sous la verrue et une sensation de douleur/picotement apparaît en principe pendant au maximum quelques heures. Si la sensation de douleur ou de picotement se prolonge jusqu'à jour suivant (24 heures) ou en cas de survenue d'un autre problème (tel que la congélation d'une zone de peau

supérieure à la taille de la verrue ou de perte de sensibilité), contactez votre médecin traitant. Il est tout à fait normal que la zone traitée présente une certaine sensibilité pendant quelques jours.

- Après la disparition de la verrue vulgaire ou plantaire, une dépigmentation ou une petite cicatrice peut se produire.
- Des petits points noirs peuvent apparaître au centre de la verrue traitée après quelques jours.
- Le recours à des produits de cryothérapie pour la congélation de verrues peut occasionner de légères brûlures dues à la température plus basse. En cas de plus grand inconfort que prévu, consultez votre médecin traitant.

## I. Instructions d'emploi (verrues vulgaires)

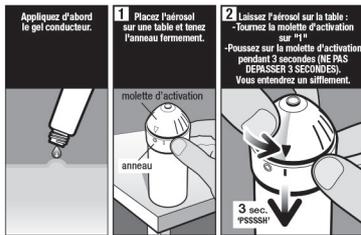

## Verrues vulgaires


Appliquez une goutte de gel activateur exactement au niveau de la verrue, sans presser excessivement sur le tube de gel.

- Retirez le capuchon et placez l'aérosol à la verticale sur une table ou une surface plane.
- En gardant l'aérosol en position verticale (ne l'inclinez pas), tenez le collier fermement entre le pouce et l'index, ensuite, avec votre autre main, faites tourner la molette dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et appuyez fermement sur celle-ci vers le bas pendant 3 secondes sans toucher l'embout métallique. Vous entendrez un bruit d'activation (sifflement).
- Assurez-vous que la molette retourne automatiquement en position zéro pour bloquer le système avant l'application du produit. Attendez 2 secondes, le temps que l'embout métallique se refroidisse.
- Appliquez avec précision l'embout métallique réfrigéré sur la verrue vulgaire (au niveau des mains) pendant 20 secondes.

## Verrues plantaires

Appliquez une goutte de gel activateur avec précision sur la verrue plantaire, sans presser excessivement sur le tube de gel.

- Retirez le capuchon et placez l'aérosol à la verticale sur une table ou une surface plane.
- En gardant l'aérosol en position verticale (ne l'inclinez pas), tenez le collier fermement entre le pouce et l'index ensuite, avec votre autre main, faites tourner la molette dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et appuyez fermement sur celle-ci vers le bas pendant 3 secondes sans toucher l'embout métallique. Vous entendrez un bruit d'activation (sifflement).
- Assurez-vous que la molette retourne automatiquement en position zéro pour bloquer le système avant l'application du produit. Attendez

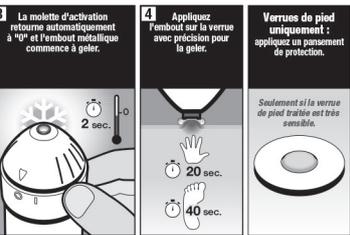

- 2 secondes, le temps que l'embout métallique se refroidisse.
- Appliquez avec précision l'embout métallique réfrigéré sur la verrue plantaire (au niveau des pieds) pendant 40 secondes.

En cas de peau particulièrement sensible (à savoir si vous avez ressenti des difficultés à marcher après le traitement), vous pouvez vous servir d'un pansement en mousse pour protéger la zone plantaire sensible de la verrue, lorsque le traitement est complètement terminé. Retirez soigneusement le pansement en mousse de son support. Appliquez la face adhésive du pansement en mousse en plaçant le renforcement directement au-dessus de la petite zone sensible.

**Il est essentiel de respecter rigoureusement les instructions de la notice explicative. Un usage négligent peut entraîner une réfrigération trop profonde et ainsi une lésion permanente au niveau de la couche supérieure de la peau des doigts et des orteils. Avec pour effet une cicatrice permanente ou des lésions nerveuses.**

# Advanced Warzen- & Plantarwarzenentferner

## Inhaltsübersicht

- Indikationen
- Packungsinhalt des Wortie® Advanced Warzen- & Plantarwarzenentferners
- Alles über Warzen
- Warnungen
- Vorsichtsmaßnahmen
- Was ist zu tun, wenn ich nicht sicher bin, ob es sich bei der Anwendung um eine Warze handelt?
- Wie funktioniert der Wortie® Advanced Warzen- & Plantarwarzenentferner?
- Nebenwirkungen
- Anwendungshinweise
- Nachbehandlung

## A. Indikationen

Der Wortie® Advanced Warzen- & Plantarwarzenentferner ist für die rezeptfreie Behandlung hartnäckiger, reifer, verhornter Warzen & Plantarwarzen bestimmt.

## B. Packungsinhalt des Wortie® Advanced Warzen- & Plantarwarzenentferners

50-ml-Druckbehälter mit verdichtetem Dimethylether-Flüssigas und einer flachen Metallspitze zur Übertragung der Kälte auf die Warze oder Plantarwarze.

Tube mit leitfähigem Gel und ein Set schützender Schaumpads.

Dieses Informationsblatt, in welchem Sie das Wirkprinzip und die Anwendung des Produkts sowie die Warnhinweise und Anwendungsregeln nachlesen können.

## C. Alles über Warzen

Warzen (auch als gemeine Warzen bekannt) bilden sich häufig auf den Fingern, dem Handrücken, an den Knien und Ellbogen. Die gemeine Warze erkennt man an ihrem rauen, „blumenkohlähnlichen“ Erscheinungsbild auf der Hautoberfläche. Das höchst ansteckende Warzenvirus kann von Mensch zu Mensch oder von einem Körperteil zum nächsten durch direkten Kontakt mit einem infizierten Areal übertragen werden.

Plantarwarzen (auch als Fußsohlen- oder Dornwarzen bekannt) ähneln den gemeinen Warzen, treten jedoch ausschließlich an der Fußsohle oder unter den Zehen auf. Im Allgemeinen sind sie schmerzhaft und sehen häufig aus wie ein kleiner weißer Hautring mit schwarzen Punkten in der Mitte. Plantarwarzen sind ebenfalls ansteckend und können auf andere Menschen durch Kontakt mit einer feuchten Oberfläche, beispielsweise über den Boden, übertragen werden.

## D. Warnungen

- Halten Sie sich beim Gebrauch genau an die Anleitungen.
- Wegen der Infektiosität des Virus sollte das leitfähige Gel ausschließlich auf Warzen und/oder Verrucas angebracht werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie die zu behandelnde Warze nicht deutlich erkennen können. Wenn Sie den Wortie® Advanced Warzen- & Plantarwarzenentferner versehentlich auf Hautpartien auftragen, die keine Warzen sind, können dadurch ernsthafte Verbrennungen und eine dauerhafte Vernarbung der Haut verursacht werden.
- Verwenden Sie das leitfähige Gel nicht, wenn Sie gegenüber einem oder mehreren Inhaltsstoffen empfindlich reagieren.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus, wenn Sie den Applikator auf die Warze oder Plantarwarze halten.
- Nicht bei Kindern im Alter unter 12 Jahren anwenden. Es ist unklar, wie sich der Wortie® Advanced Warzen- & Plantarwarzenentferner auf die Haut von Kindern auswirkt.
- Nicht anwenden, wenn Sie unter Diabetes oder Durchblutungsstörungen leiden. Das Wirkprinzip des Wortie® Advanced Warzen- & Plantarwarzenentferners beruht auf der Vereisung der Warze. Der vereiste Bereich könnte bei Diabetes oder Durchblutungsstörungen weniger schnell oder nur schwer heilen.
- Nicht anwenden, wenn Sie schwanger sind oder stillen. Es ist unklar, wie sich der Wortie® Advanced Warzen- & Plantarwarzenentferner bei Patienten unter diesen Umständen auswirkt.
- Nicht in Bereichen mit feiner Haut verwenden, wie beispielsweise im Gesicht, unter den Achseln, an der Brust, am Gesäß oder im Genitalbereich. Dies könnte zu Verbrennungen hervorufen und eine bleibende Vernarbung zur Folge haben.
- Nicht auf gereizter Haut oder auf Stellen anwenden, die infiziert oder gerötet sind oder Zeichen einer Entzündung aufweisen, wie bei Juckreiz oder einer Schwellung. Eine Behandlung dieser Stellen mit dem Wortie® Advanced Warzen- & Plantarwarzenentferner hätte eine Verschlimmerung des Zustands und evtl. eine zusätzliche Infektion zur Folge. Derartige Leiden sind u. U. keine Warzen und müssen von einem Allgemeinmediziner untersucht werden.
- Nicht anwenden auf Leberflecken, Muttermalen, behaarten Warzen, Genitalwarzen (am Penis oder im vaginalen Bereich) oder Warzen im Gesicht oder auf Schleimhäuten (z. B. im Mund, in der Nase, am After, im Genitalbereich, an Lippen, Ohren oder in der Nähe der Augen). Dies könnte Verbrennungen hervorufen, eine bleibende Vernarbung der Haut oder sogar Erblindung zur Folge haben.
- Das Schaumpad und/oder das Gel nicht auf offenen, infizierten oder unentzündeten Wunden anwenden.
- Überschreiten Sie nicht die vorgeschriebene Anwendungszeit: 20 Sekunden für Warzen oder 40 Sekunden für Plantarwarzen. Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus, wenn Sie den Applikator auf die Warze oder Plantarwarze drücken.

- Nicht verwenden, wenn Sie die Angaben auf der Verpackung oder auf diesem Informationsblatt nicht klar lesen können.

**Verwenden Sie den Wortie® Advanced Warzen- & Plantarwarzenentferner nur dann, wenn Sie sicher sind, dass es sich bei der Hauterkrankung um eine Warze (gemeine Warze oder Plantarwarze) handelt.**

**Konsultieren Sie andernfalls zunächst Ihren Hausarzt.** Wenn Sie eine Hauterkrankung mit dem Wortie® Advanced Warzen- & Plantarwarzenentferner behandeln, es sich jedoch nicht um eine Warze handelt, wird die angemessene Behandlung dadurch verzögert. Eine solche Verzögerung kann ernsthafte Hautleiden oder Krankheiten nach sich ziehen.

**Kontakt mit Augen vermeiden.** Der Kontakt mit den Augen kann zu Erblindung führen. Reiben oder berühren Sie die Augen nicht mit den Händen, die mit dem Wortie® Advanced Warzen- & Plantarwarzenentferner behandelt wurden. Gelangt das Produkt in die Augen, spülen Sie diese 15 Minuten lang mit Wasser und fordern Sie umgehend medizinische Hilfe an.

**Nicht schlucken.** Der Inhalt ist giftig und kann schwere innere Schäden zur Folge haben. Falls Sie das Produkt schlucken, fordern Sie umgehend medizinische Hilfe an, oder wählen Sie den Giftnotruf.

**Nur zur äußeren Anwendung.** Wenn Sie bei der Anwendung des Wortie® Advanced Warzen- & Plantarwarzenentferners nicht genau die Anleitungen befolgen, wenn Sie ihn versehentlich direkt auf der Haut anwenden oder Erkrankungen behandeln, die keine Warzen sind, kann dies ernsthafte Verbrennungen und eine dauerhafte Vernarbung der Haut nach sich ziehen.

**Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.** Kinder sind nicht in der Lage, die Anleitung zur fachgerechten Anwendung dieses Produkts zu verstehen. Der Inhalt ist gefährlich, wenn er geschluckt, eingeatmet, auf Körper Teile ohne Warzen gesprüht oder Hitze ausgesetzt wird.

## E. Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie den Wortie® Advanced Warzen- & Plantarwarzenentferner nicht:
  - wenn der Konus nach der Aktivierung auf Position „1“ stehenbleibt, und/oder
  - wenn Sie während der Aktivierung kein Zischen hören (Freisetzung des Aerosols); und/oder
  - wenn das Zischen nach der Aktivierung weiterhin zu hören ist, und/oder
  - wenn die Spitze nach der Aktivierung nicht kalt wird. Es sollte sich eine „Eishaube“ auf der Metallspitze bilden.*Falls eine oder mehrere der oben genannten Störungen auftreten, funktioniert das Gerät evtl. nicht ordnungsgemäß. Ein Versagen des Geräts kann Verletzungen oder eine unzureichende/unvollständige Behandlung zur Folge haben.*
- Die Metallspitze ist mit Nickel beschichtet, was eine allergische Reaktion hervorruft kann.
- Das leitfähige Gel sollte ausschließlich zur Behandlung hartnäckiger, reifer Warzen und Plantarwarzen eingesetzt werden. Wenn Sie sich im Hinblick auf den Zustand der unerwünschten Warze oder Plantarwarze unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt.
- Reinigen Sie den Applikator mit einem kochendalkoholgetränkten Tuch, falls das Gerät von mehr als einer Person benutzt wird, und/oder nach jeder Anwendung.
- Lassen Sie die Metallspitze nach jeder Anwendung die Raumtemperatur erreichen, bevor Sie sie zur Behandlung an weiteren Warzen wieder aktivieren.
- Wenn ein Finger oder Zeh von mehr als einer Warze betroffen ist, behandeln Sie jeweils nur eine Warze pro Anwendung. Das Vereisen von mehr als einer Warze auf einem spezifischen kleinen Hautareal kann einen längeren oder unvollständigen Heilungsprozess nach sich ziehen. Behandeln Sie die verbleibenden Warzen separat mit einer jeweils zweiwöchigen Pause zwischen den einzelnen Anwendungen.
- In den meisten Fällen ist für jede Warze nur eine Behandlung erforderlich. Behandeln Sie jede Warze insgesamt nicht mehr als zweimal mit dem Wortie® Advanced Warzen- & Plantarwarzenentferner. Konsultieren Sie Ihren Hausarzt, wenn sich nach zwei Behandlungen keine Besserung einstellt.
- Verwenden Sie den Wortie® Advanced Warzen- & Plantarwarzenentferner nicht kombiniert mit einer anderen Warzenentfernmethode, weil unklar ist, wie sich die Kombination auf Ihre Haut auswirkt. Die gleichzeitige Anwendung kann ernsthafte Verbrennungen und eine dauerhafte Vernarbung der Haut zur Folge haben.
- Das schmerzende/stechende Gefühl nach der Behandlung der gemeinen Warze sollte innerhalb weniger Stunden nachlassen. Bei Plantarwarzen kann der Schmerz / das Stechen bis zu 24 Stunden andauern. Falls das Unbehagen bzw. das schmerzende/stechende Gefühl über diesen Zeitraum hinaus (24 Stunden bei gemeinen Warzen und Plantarwarzen) anhält, konsultieren Sie Ihren Hausarzt. Dies kann bedeuten, dass der Bereich zu tief vereist und gegebenenfalls medizinische Hilfe erforderlich ist.
- Atmen Sie den Dampf / das Spray nicht ein, und führen Sie die Behandlung nur in gut belüfteten Räumen durch. Das Einatmen des Dampfes/Sprays könnte giftig sein.
- Waschen Sie sich die Hände (mit Ausnahme des behandelten Areals) unmittelbar nach der Anwendung. Wenn Sie den behandelten Bereich unmittelbar nach der Anwendung waschen, könnte sich das unangenehm anfühlen und/oder zu einem Juckreiz, Stechen / leichten Schmerzen verspüren. Sie können den behandelten Bereich waschen, sobald der Schmerz / das Stechen nachgelassen hat.
- Die mitgelieferten schützenden Schaumpads sind für die einmalige Anwendung bestimmt. Entsorgen Sie sie nach der Anwendung, und verwenden Sie sie nicht erneut.

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen. Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und an einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren. Kann bei Erwärmung bersten.

**F. Was ist zu tun, wenn ich nicht sicher bin, ob es sich bei dem Leiden um eine Warze handelt?**

Verwenden Sie den Wortie® Advanced Warzen- & Plantarwarzenentferner nur dann, wenn Sie sicher sind, dass es sich bei der Hauterkrankung um eine Warze handelt. Konsultieren Sie andernfalls zunächst Ihren Hausarzt. Wenn Sie eine Hauterkrankung mit Wortie® Advanced Warzen- & Plantarwarzenentferner behandeln, es sich jedoch nicht um eine Warze handelt, wird die angemessene Behandlung dadurch verzögert. Eine solche Verzögerung kann ernsthafte Hautleiden oder Krankheiten nach sich ziehen. Lesen Sie die Abschnitte „Warnhinweise“ und „Vorsichtsmaßnahmen“ sorgfältig durch.

## G. Wie funktioniert der Wortie® Advanced Warzen- & Plantarwarzenentferner?

- Mit dem Wortie® Advanced Warzen- & Plantarwarzenentferner werden unerwünschte Warzen oder Plantarwarzen entfernt. Das leitfähige Gel verstärkt die Vereisungsstunden vollständig. Übertragung der Kälte auf den Anwendungsbereich und befeuchtet die Haut für eine hocheffiziente Vereisung. Beim Aufsetzen der kalten Applikatorspitze auf die Warze beginnt die Vereisung innerhalb weniger Sekunden, und die Haut wird weiß. Ein leichter Schmeck, Juckreiz und/oder ein stechendes Gefühl wird infolge der Vereisung auftreten. Sobald Sie den Applikator entfernen, kehrt die Farbe wieder zurück, und Schmerz, Juckreiz und Stechen lassen sich nach und nach verschwinden innerhalb weniger Stunden vollständig.
- Nachdem das behandelte Areal die Hauttemperatur wieder erreicht und seine Färbung zurücklangt hat, kann eine Rötung derselben Größe wie der gefrorenen Warze auftreten. Durch die Vereisung kann sich in einigen Fällen innerhalb weniger Tage eine (mitunter mit Blut gefüllte) Blase unter der Warze bilden. Diese ist nicht immer sichtbar.
- Die vereiste Oberfläche der behandelten Warze löst sich nach etwa 10 bis 14 Tagen ab. In der Zwischenzeit wird sich unter der Blase neue Haut nachgebildet haben.

## H. Nebenwirkungen

- Befolgen Sie sorgfältig die vorgeschriebene Anwendungszeit (20 Sekunden für Warzen / 40 Sekunden für Plantarwarzen), um die Beschädigung lokaler Gewebe zu vermeiden.
- Nach der Anwendung kann sich die Farbe der Haut verändern und dabei von Weiß bis Rot variieren. Unter der Warze kann sich eine Blase bilden, und für einige Stunden nach der Behandlung tritt normalerweise ein schmerzendes/stechendes Gefühl auf. Wenn das schmerzende, stechende Gefühl noch am folgenden Tag (länger als 24 Stunden) anhält oder ein anderes Problem auftritt (z. B. Bläschen) der Haut über die Größe der Warze hinaus oder Taubheitsgefühl), konsultieren Sie Ihren Hausarzt. Es ist normal, dass der behandelte Bereich einige Tage lang empfindlich ist.
- Nach dem Ablassen der Warze oder Plantarwarze kann eine entzündete Hautstelle oder eine kleine Narbe zurückbleiben.
- In der Mitte der behandelten Warze können nach wenigen Tagen schwarze Punkte auftreten.
- Der Gebrauch kryotherapeutischer Produkte zur Vereisung von Warzen kann aufgrund der niedrigen Vereisungstemperatur geringfügige Verbrennungswunden verursachen. Wenn das Unbehagen stärker ist als erwartet, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt.

## I. Anwendungshinweise (gemeine Warzen)



## Gemeine Warzen

- Geben Sie einen Tropfen des leitfähigen Gels genau auf die Warze, indem Sie die Geltube vorsichtig zusammendrücken.
- Setzen Sie die Kappe und stellen Sie die Dose aufrecht auf einen Tisch oder eine ebene Oberfläche.
- Achten Sie darauf, die aufrechte Position der Dose beizubehalten (nicht neigen).** Halten Sie den Dosenhals gut zwischen Daumen und Zeigefinger fest, drehen Sie den Konus mit der anderen Hand gegen den Uhrzeigersinn und drücken Sie den Konus 3 Sekunden lang nach unten, ohne die Metallspitze zu berühren. Nun ist das Aktivierungsgeräusch (Zischen) zu hören.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der Konus automatisch zurück auf null dreht, damit das System vor dem Auftragen des Produkts verriegelt ist. Warten Sie 2 Sekunden lang, bis die Metallspitze gefroren ist.
- Setzen Sie die gefrorene Metallspitze genau auf die gemeine Warze (Hand) und halten Sie 20 Sekunden lang den Kontakt.

## J. Suivi du traitement

- Gardez la zone traitée bien propre.
- Vous pouvez aller à la piscine ou prendre une douche.
- Ne grattez pas la zone traitée pour éviter tout risque d'infection.
- En cas de nécessité, protégez les ampoules au moyen d'une gaze ou d'un bandage adhésif stérile.
- Né percer pas les ampoules. Percer des ampoules serait douloureux et pourrait provoquer une infection.
- Évitez toute exposition au soleil ou appliquez une crème de protection solaire (SP30 ou supérieur) et réduisez autant que possible tout risque de traumatisme au niveau des sites traités, jusqu'à la guérison complète (à savoir la disparition de la verrue vulgaire/plantaire et le retour à une coloration normale).

## Le produit anti-verrues (vulgaires et plantaires) Wortie® Advanced contient :

Une bombe aérosol (50 ml)

Composant : Dimethyl ether

Tube de gel activateur (3 ml)

Composants : Aqua, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Carbomer, Triethanolamine, Caprylyldioxamic Acid, Methylpropanediol

## Six pansements de protection en mousse

0481

Dernière révision : Janvier 2015

Le produit peut être utilisé jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'emballage.

Pour un complément d'informations et une vidéo d'instructions, veuillez vous rendre sur [www.wortie.be](http://www.wortie.be)

## Fabricant:

**YouMedical**  
YouMedical B.V.,  
Rijnsburgstraat 9-11,  
1059 AT Amsterdam,  
Pays-Bas.

## Distributeur:

Patch Pharma,  
1, avenue Reine Astrid,  
1440 Wautier-Braine,  
Belgique.

## Plantarwarzen (Fußsohlenwarzen)

Geben Sie einen Tropfen des leitfähigen Gels genau auf die Plantarwarze, indem Sie die Geltube vorsichtig zusammendrücken.

- Entfernen Sie die Kappe und stellen Sie die Dose aufrecht auf einen Tisch oder eine ebene Oberfläche. Halten Sie die Dose am Hals fest.
- Achten Sie darauf, die aufrechte Position der Dose beizubehalten (nicht neigen).** Halten Sie den Dosenhals gut zwischen Daumen und Zeigefinger fest, drehen Sie den Konus mit der anderen Hand gegen den Uhrzeigersinn und drücken Sie den Konus 3 Sekunden lang nach unten, ohne die Metallspitze zu berühren. Nun ist das Aktivierungsgeräusch (Zischen) zu hören.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der Konus automatisch zurück auf null dreht, damit das System vor dem Auftragen des Produkts verriegelt ist. Warten Sie 2 Sekunden lang, bis die Metallspitze gefroren ist.
- Setzen Sie die gefrorene Metallspitze genau auf die Plantarwarze (Fuß) und halten Sie 40 Sekunden lang den Kontakt.

Bei besonders empfindlicher Haut (wenn Sie z. B. nach der Behandlung Schwereigkeiten haben zu laufen) kann ein Schaumpad verwendet werden, um den empfindlichen Plantarwarzenbereich nach der Behandlung zu schützen. Entfernen Sie das Schaumpad vorsichtig von der Tragefolie. Setzen Sie die lebende Seite des Schaumpads auf die Haut, wobei das Loch direkt über dem behandelten Punkt liegen sollte.

**Es ist wichtig, die Anleitungen auf dem Informationsblatt genau zu befolgen. Ein nachlässiger Gebrauch kann eine zu tiefe Vereisung und eine dauerhafte Schädigung der oberen Hautschicht von Fingern und Zehen verursachen. Dies kann bleibende Narbenbildung oder Nervenschäden nach sich ziehen.**

## J. Nachbehandlung

- Halten Sie das behandelte Hautareal sauber.
- Schwimmen und Duschen sind erlaubt.
- Vermeiden Sie jegliche Zupfen oder Kratzen am behandelten Bereich, um kleine Infektionen auszulösen.
- Schützen Sie Blasen gegebenenfalls mit Verbundmaterial oder sterilem Pfostenverband.
- Flaschen Sie Blasen nicht auf. Das Aufstechen von Blasen ist schmerzhaft und kann Infektionen verursachen.
- Vermeiden Sie, die behandelte Stelle dem Sonnenlicht auszusetzen, oder verwenden Sie einen Sonnenschutz (Lichtschutzfaktor 30 oder höher), und vermeiden Sie jegliche Beanspruchung, bis der Bereich vollständig abgeheilt ist (d. h. bis sich die Warze/Plantarwarze abgelöst hat und die Hautfärbung wieder normal ist).

## Wortie® Advanced Warzen- & Plantarwarzenentferner enthält:

Aerosol-Dose (50 ml)

Inhaltsstoffe: Dimethyl ether

Tube mit leitfähigem Gel (3 ml)

Inhaltsstoffe: Aqua, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Carbomer, Triethanolamine, Caprylyldioxamic Acid, Methylpropanediol

## Sechs schützende Schaumpads

0481

Zuletzt überarbeitet am: Januar 2015

Das Produkt darf bis zum auf der Schachtel markierten Haltbarkeitsdatum verwendet werden.

Nähere Informationen und eine Videoanleitung finden Sie unter [www.wortie.be](http://www.wortie.be)

## Hersteller:

**YouMedical**  
YouMedical B.V.,  
Rijnsburgstraat 9-11,  
1059 AT Amsterdam,  
Niederlande.

## Lieferant:

Patch Pharma,  
Avenue Reine Astrid 1,  
1440 Woutersbrakel,  
Belgien.